

## スコプレチン標準品によるランプの適合性確認試験 (PMDA 基準)

### [薄層板]

Merck Silicagel 60F<sub>254</sub>

### [検出方法]


各濃度 2 $\mu$ l をスポットし、紫外線 365 nm を照射する。

### [装置]

UV CUBE RD+365 nm LED ユニットを使用。

デジタルカメラ：キャノン G16

UV CUBE LED365nm

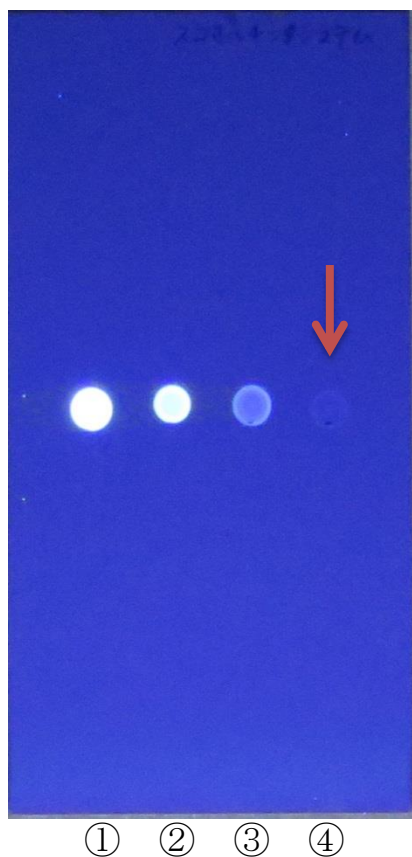

- ① スコポレチン標準品 1mg/mL
- ② スコポレチン標準品 100ug/mL
- ③ スコポレチン標準品 10ug/mL
- ④ スコポレチン標準品 0.5ug/mL (ランプ適合性試験濃度)