


UV CUBE

LeScience

紫外線照射蛍光撮影装置

お持ちのカメラに対応

暗室なしで蛍光写真の撮影が可能！ for TLC写真撮影

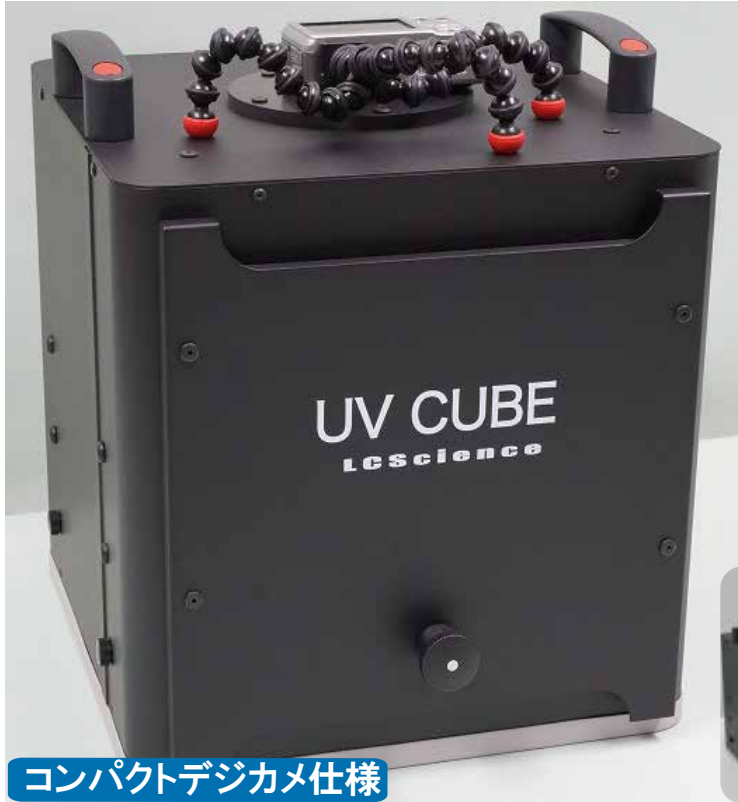

コンパクトデジカメ仕様

- TLCの写真撮影が卓上で簡単に！
- 直接UV光を受けない安全設計！
- 毎回同じ条件で撮影が可能に！
- 撮影ステージ高さを4段階変更可能！
- 持ちやすいグリップ、ストッパー付スライドドア！
- 254,352,365nmの光源選択可能！

コンパクトデジカメ仕様

UV CUBE SC 標準2灯 254,352

マグネット式フレキシブルスタンドでカメラの設置は自由自在。
<付属品>

マグネット式フレキシブルスタンド、撮影窓(50φラバーリング)

定価 **¥108,000**(税別)

★3灯 254,352,白色灯 UV CUBE RC ¥128,000(税別)


オプション

365nm UV LED光源ユニット
¥99,500(税別)

365nmLED光源は日本薬局方確認試験の規定に対応した波長をご用意いたしました。



簡単！
キレイ！

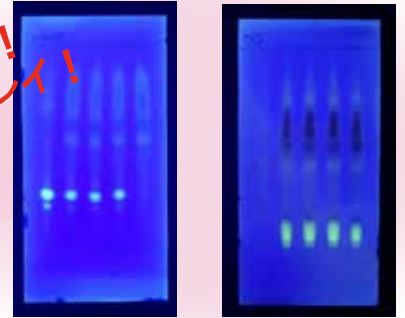

デジタル一眼仕様

デジタル一眼仕様

UV CUBE SD 標準2灯 254,352

外からの光を完全にシャットアウト。
よりきれいな写真の撮影が可能。
ご使用レンズのフィルターサイズをご指定ください。
※フォーカス時にレンズ先端が回転するレンズは
推奨いたしません。


<付属品>

樹脂製レンズフードアダプター、
77mmレンズフード、
ステップアップリング(要サイズ指定)

定価 **¥118,000**(税別)

★3灯 254,352,白色灯 UV CUBE RD ¥138,000(税別)


UV CUBE 仕様選択

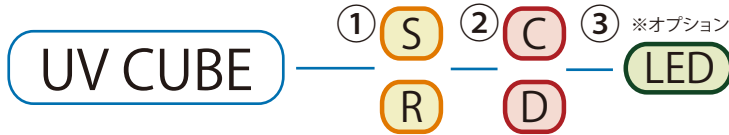

① ランプの波長選択・取り付け位置

S : 2灯仕様 (a,b)

R : 3灯仕様 (a,b,c)

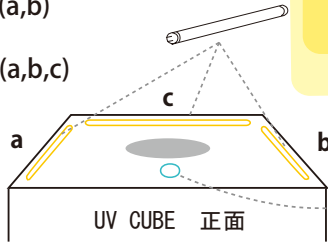

標準ランプ(6W 蛍光管)
254nm 352nm
白色灯
※オプション (6W仕様)
白色LED
サイズ共通

365nm LEDユニット(別電源)
※オプション



製薬企業さまに!



底面から見上げた装置内の写真です。写真下がスライドドア側です。

| | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | ③ |
| 254nm | 352nm | 白色灯 | 白色LED | 365nmLED |
| 標準ランプ | 標準ランプ | 標準ランプ | オプション | オプション |
| ¥ 3,400- | ¥ 3,400- | ¥ 1,600- | ¥ 16,500- | ¥ 99,500- |

② 取り付けカメラ ※カメラは付属しません。お手持ちのカメラに対応いたします。

C コンパクトデジカメ



ほとんどのコンパクトデジカメに対応

D デジタル一眼レフ



お使いのカメラに適したアタッチメントをお付けします
カメラ・レンズの型式、レンズフィルター径をお教えてください。

製品仕様

■ランプ: 2灯タイプ/6W×2(254nm、352nm各1本)内蔵 3灯タイプ/6W×3(254nm、352nm、白色蛍光灯各1本)内蔵 スイッチ切り替えにて使用

ランプ(励起光源)の種類変更可。同種ランプを搭載した場合同時点灯可能(2灯同時:12W 3灯同時:18Wの照射)

■電源: 2灯タイプ/AC100V 0.3A 3灯タイプ/AC100V 0.45A

外形寸法: 280W×320D×320H ドア間口寸法: 205W×150H 底面開口寸法: 280×280mm 材質: スチール製(つや消しブラック粉体塗装) 重量: 6.1kg

| 仕様 | コンパクトデジカメ対応 | | デジタル一眼対応 | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| | SC(2灯) | RC(3灯) | SD(2灯) | RD(3灯) |
| 搭載ランプ (落射励起光源) | 標準ランプ 254nm、352nm、白色灯の中から選択 ※白色LED、365nmLEDユニットは オプションにて選択可 | | | |
| 価格(税別) | ¥ 108,000- | ¥ 128,000- | ¥ 118,000- | ¥ 138,000- |

製造発売元

LC Science

エルシーサイエンス株式会社 理化学機器・器具
製造・販売・技術サービス

●営業所 〒632-0086 奈良県天理市庵治町830-16
TEL: 0743-64-2860 FAX: 0743-64-2867

http://www.lc-s.co.jp E-mail: chromat@lc-s.co.jp

販売代理店

